




SOLUCIONES «ARTRITIS»

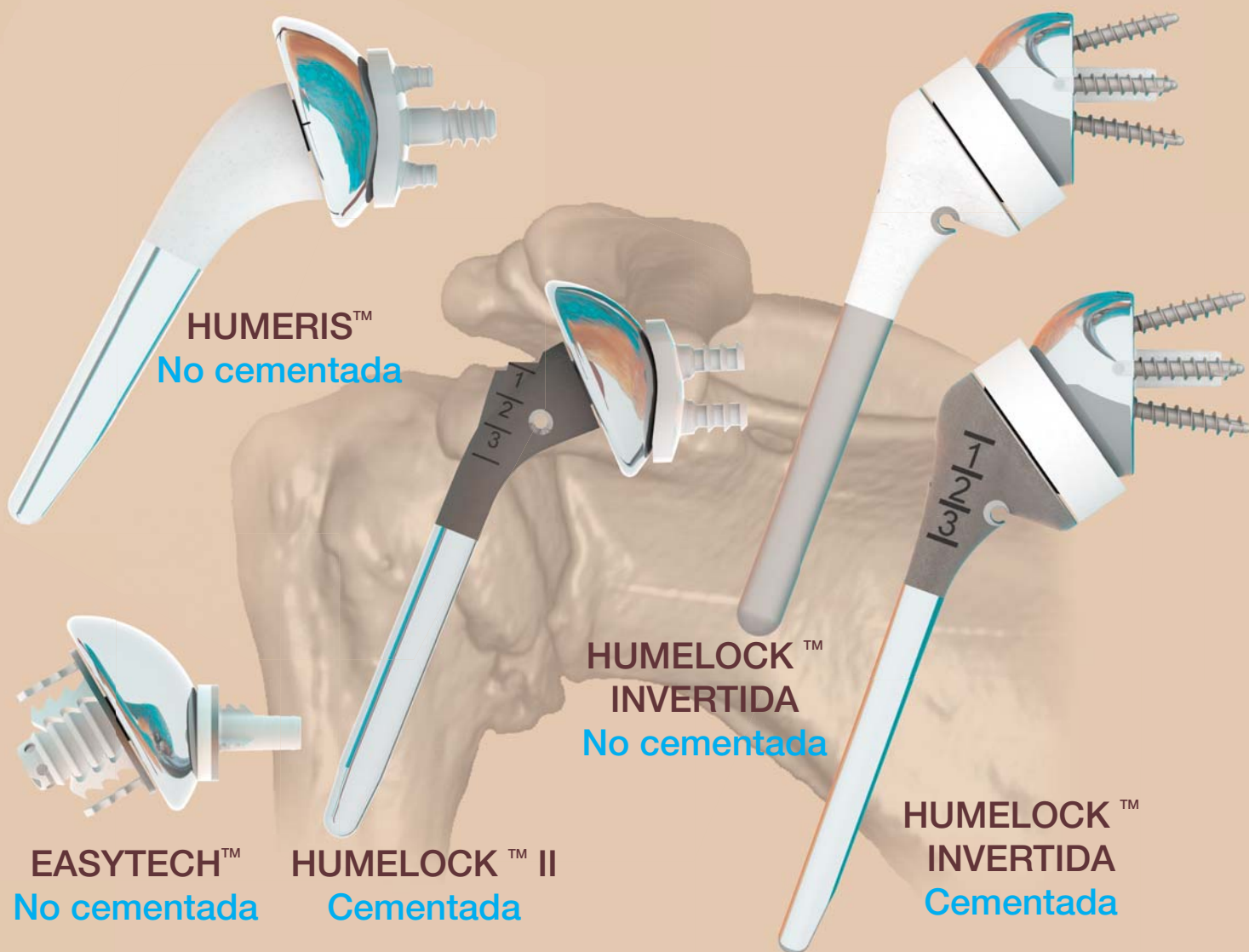

HUMERIS™
No cementada

HUMELOCK™
INVERTIDA
No cementada

EASYTECH™
No cementada

HUMELOCK™ II
Cementada

HUMELOCK™
INVERTIDA
Cementada

FICHA TÉCNICA



ANATÓMICA


REVERSIBLE - REVISIÓN

INVERTIDA

Parcial

Total

Paso de prótesis anatómica a prótesis invertida: quitar la cabeza y el doble cono, impactar el polietileno humeral 135/145°, transformando el ángulo de 135° a 145°.

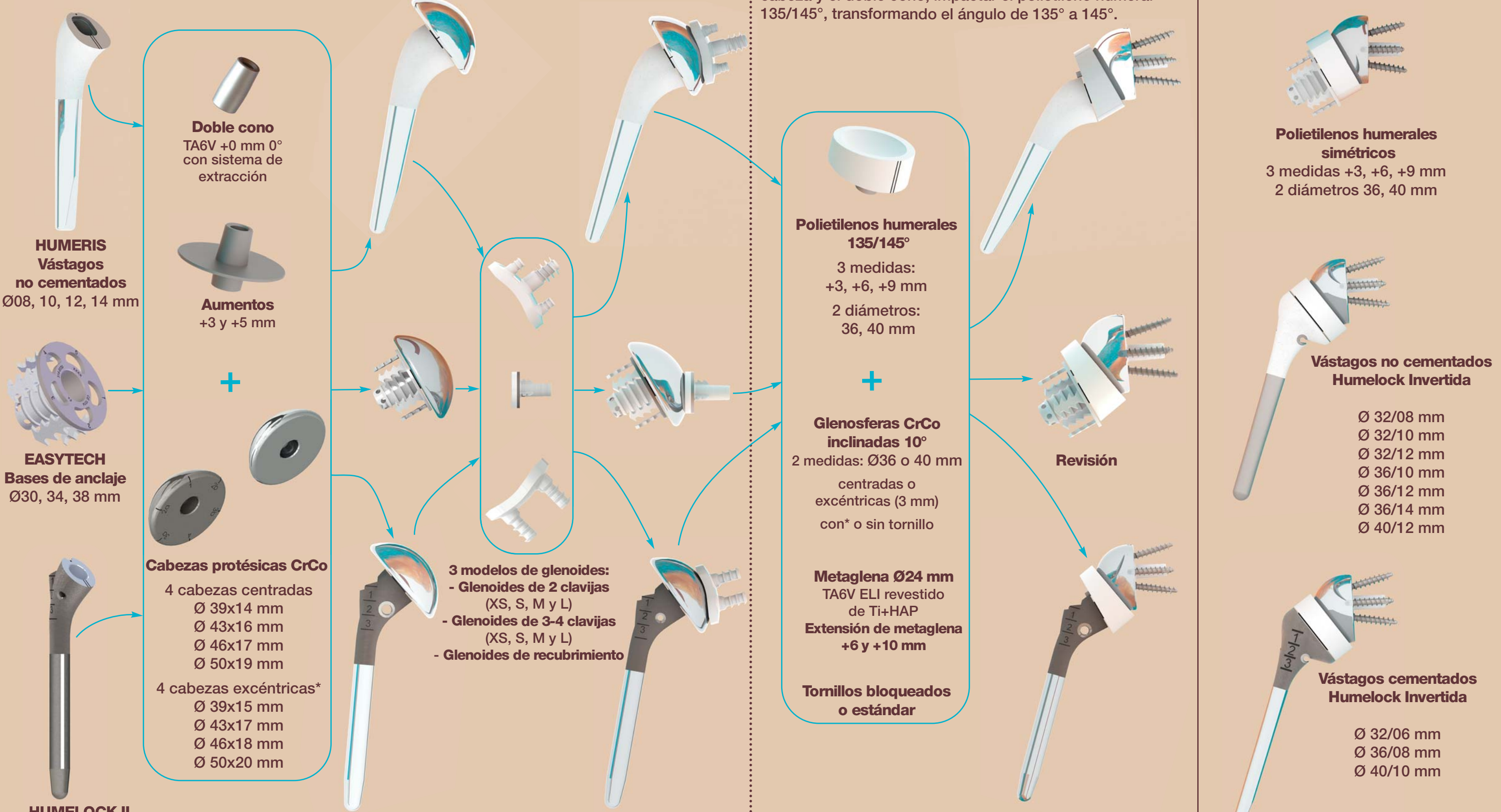

HUMERIS
Vástagos
no cementados
Ø08, 10, 12, 14 mm

EASYTECH
Bases de anclaje
Ø30, 34, 38 mm

HUMELock II
Vástagos cementados
Ø06, 08, 10, 12 mm

Doble cono
TA6V +0 mm 0°
con sistema de
extracción

Aumentos
+3 y +5 mm

Cabezas protésicas CrCo
4 cabezas centradas
Ø 39x14 mm
Ø 43x16 mm
Ø 46x17 mm
Ø 50x19 mm
4 cabezas excéntricas*
Ø 39x15 mm
Ø 43x17 mm
Ø 46x18 mm
Ø 50x20 mm

3 modelos de glenoides:
- **Glenoides de 2 clavijas**
(XS, S, M y L)
- **Glenoides de 3-4 clavijas**
(XS, S, M y L)
- **Glenoides de recubrimiento**

Polietilenos humerales
135/145°
3 medidas:
+3, +6, +9 mm
2 diámetros:
36, 40 mm

Glenosferas CrCo
inclinadas 10°
2 medidas: Ø36 o 40 mm
centradas o
excéntricas (3 mm)
con* o sin tornillo

Metaglena Ø24 mm
TA6V ELI revestido
de Ti+HAP
Extensión de metaglena
+6 y +10 mm

Tornillos bloqueados
o estándar

Polietilenos humerales
simétricos
3 medidas +3, +6, +9 mm
2 diámetros 36, 40 mm

Vástagos no cementados
Humelock Invertida

Ø 32/08 mm
Ø 32/10 mm
Ø 32/12 mm
Ø 36/10 mm
Ø 36/12 mm
Ø 36/14 mm
Ø 40/12 mm

Vástagos cementados
Humelock Invertida

Ø 32/06 mm
Ø 36/08 mm
Ø 40/10 mm

* Existen en CrCo con revestimiento en TiN.

CARACTERÍSTICAS

BASE DE ANCLAJE EASYTECH :

Estabilidad primaria gracias al tetón central retentivo y a las anclas periféricas.
Estabilidad secundaria asegurada gracias a un revestimiento de doble capas Ti + HAP.
Antirotación gracias a las puntas de las anclas orientadas con alternancias de ejes diferentes.
Adaptación cónica hembra que permite su reversibilidad.

Modularidad de la prótesis EASYTECH

Base de anclaje	30	34	38
	39	43	46
Diámetro cabeza	43	46	50



Combinaciones cabeza humeral / glenoides

Tamaño glenoides	XS	S	M	L
	39	39	43	43
Diámetro cabeza	43	43	46	46
			50	50



Glenoides de 2 o 3-4 clavijas :

Concebido en UHMWPE con marcador radioopaco en tantalio, clavijas retentivas con 2 distancias diferentes XS-S / M-L. Mismatch incluido entre 5 y 9. Fondo convexo, rugoso para una mejor adhesión del cemento.

Glenoides de recubrimiento sin cemento :

Adaptable a todas las anatomías, Ø20mm, en UHMWPE termocomprimido en un casco en TA6V ELI con revestimiento de Ti+HAP con 3 aletas de antirotación y sistema de extracción. 2 extensiones +6 y +10 mm para lograr un anclaje más profundo.



1663, rue de Majornas - 01440 Viriat - France
Tél. : (33) 04 74 55 35 55 - Fax : (33) 04 74 52 44 01
E-mail: info@fxsolutions.fr - www.fxsolutions.fr